



Anatome: Hasta transferinde bir devrim...

Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve hafif yapısı ile Anatome, herhangi bir tekerlekli sandalye olmanın çok ötesindedir. Hasta bakımı için vazgeçilmez bir platform olup sağlık personeline pek çok kolaylık sağlar.

- HASTA MORFOLOJİSİNE GÖRE AYARLANABİLİR
- BASI YARALARININ OLUŞMASINI ENGELLEYİCİ
- ERGONOMİK VE KULLANIMI KOLAY

Anatome hasta transferini kolaylaştırır



Anatome'un esnek yapısı (katlanabilir baş desteği, ayarlanabilir kolluklar ve sandalye yükseklik kontrolü) hasta transferinin en güvenli şekilde gerçekleşmesine olanak sağlar.

Anatome hasta rahatlığını ve emniyetini artırır



Anatome bireysel morfolojiye uyum sağlayacak pek çok değişik pozisyon alabilir. Hastaya huzur dolu güvenli bir ortam sağlar.

Anatome hasta bakım etkinliğini artırır

Pek çok aksesuar ilavesi ile (boyun desteği AC901A, Serum askılığı AC926A ve 941A, portatif ABS masa üstü AC 969P) tüm koşullarda üstün nitelikli hasta bakımı sağlanır.

Hastaların daha rahat etmeleri ve baskı yaralarının önlenmesi için AC 947A "konfor-koruma" tipi oturma minderi mevcuttur.



Teknik özellikler

SM647A yüksekliği sabit model


- Ana gövde: Epoksi kaplı kaynak.
- Oturma/sırt kısmı ve bafli desteği: Isıl şekillendirilmiş ABS kalıp üzerine tüp formunda metal yapı.
- Çıkartılabilir, dikişsiz oturma bölümü.
- Ayarlanabilir katlanabilir baş desteği.
- Serum askılığı soketleri ve drenaj torbaları için askılıklar.
- İki fren tertibatlı dört adet 125 mm çapında tekerlek.
- Termoplastik döküm katlanabilir ayak desteği.
- Sırt kısmında itirme kolları.
- Ayarlanabilen sırt açısı ve sandalyenin her iki yanında açılabilir kumandaları.
- PVC kaplama oturma bölümü için değişik renk seçenekleri.

Not: Bu modelin oturma bölümü yüksekliği 51 cm olup sabittir.

SM647B yüksekliği ayarlanabilir model

Model 647A'dakilere ek olarak aşağıda sıralanan özelliklere sahiptir:

- Çift taraflı kontrol pedali olan merkezi fren sistemi. Yön tekerleği kilit sistemine sahip.
- Biri otomatik kilit özelliğine sahip yön tekerleği olmak üzere dört adet 125 mm çapında tekerlek
- Koltuğun iki tarafında bulunan hidrolik ayak pedalları kullanılarak 455-490 mm arasında oturma bölümü yükseklik kontrolü. Yükseklik kontrolü transfer ve değişik bakım koşulları için önemli esneklik ve kolaylık yaratmaktadır.
- Sırt ve oturma bölmeleri hasta konfor ve güvenliği için birlikte hareket eder.

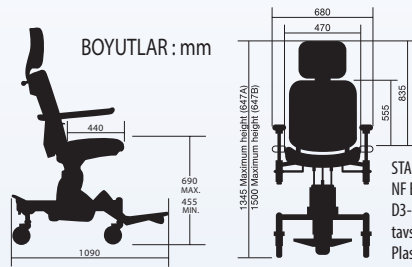

STANDARTLAR: D 60-070, D 61-070 - NF EN 1021-1, NF EN 1021-2
D3-89- GPEM/CP sayılı yangın standartları ile ilgili tavsiye kararına uyumlu
Plastik ayak ve başucu panoları için Sınıf M1F2

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom +44 (0)1530 411000
Deutschland 0800 8 63 55 37
Nederland +31 (0)347 32 35 32
Italia +39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) +41 (0)21 706 21 38

Österreich +43 (0)2243 28550
Ireland +353 (0)1 413 6005
Iberia +34 (0)93 6856000
Nordic Countries +46 (0)20 78 10 30
Export Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom, tasarım, özellik ve modellerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom tarafından sadece satın alınan veya kiralanılan ürünleri kapsayan, açık bir yazılı garanti verilmektedir. © 2013 Hill-Rom SARL, HER HAKKI SAKLIDIR.